



## Ganz einfach: absaugen, sammeln, entsorgen

SAFEVAC - Rückstände von Medien und Zellkulturen sicher absaugen

Gemeinsam immer einen Schritt voraus



# Vakuum Absaugsystem SAFEVAC

## Anforderungen

- Einfache Handhabung & Bedienung
- Schnell betriebsbereit
- Mobil einsetzbar

## Lösung

VACUSAFE ist die "All-in-One"-Komplettlösung für das sichere absaugen und entsorgen von Zellkultur- und Medien-Rückständen im Labor.

Die im Lieferumfang enthaltenen Aufsätze für den Handgriff lassen so gut wie keine Wünsche offen. So können auch serologische Pipetten und Pipettenspitzen, der gängigsten Hersteller, mit dem System verwendet werden.

Reduziert auf das Wesentliche überzeugt das System mit seiner Bedienerfreundlichkeit.

Ein Füllstandssensor schützt vor dem Überfüllen des Auffangbehälters und sorgt so für Sicherheit.

## Funktionsweise

Über eine Drehregelung lässt sich das gewünschte Vakuum ganz einfach einstellen, innerhalb weniger Sekunden wird dieses aufgebaut und das System ist betriebsbereit.

Der handliche Absauggriff bietet flexibles Absaugen an der gewünschten Stelle. Die Inbetriebnahme ist für jedermann in kürzester Zeit zu meistern.



## Normen


- CE zertifiziert

## Eigenschaften

- Vakuum-Bereich 0 - 600 mbar
- Saugleistung 1 - 15 ml/s
- 4 Liter Vakuum-Flasche

## Lieferumfang

- Absaugeinheit
- Vakuum-Flasche inkl. Schraubverschluss
- Schraubverschluss mit Schlauchanschlüssen
- Traghilfe für Flasche
- Absaughandgriff
- Edelstahl-Nadeln in verschiedenen Längen und Grössen
- 8-Kanal Nadel
- Aufsatz für Pipettenspitzen
- 8-Kanal Aufsatz für Pipettenspitzen
- Kabel Füllstandssensor
- Schläuche
- Filter
- Manual

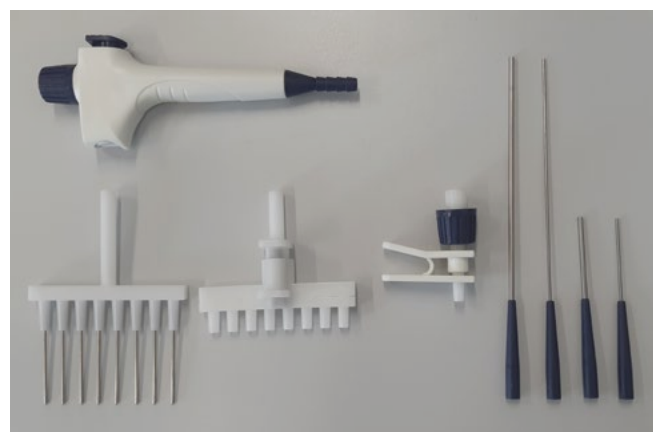

## Kontakt

SKAN AG Pure Solutions  
Binnerstrasse 116  
4123 Allschwil  
Tel. +41 61 485 45 87  
vk-lab@skan.ch  
www.skan.ch/puresolutions